

Bienvenido al Módulo de Configuración de **LiSalud**, aquí configuraremos todo lo que aparecerá en el reporte de Resultados.

Te recomendamos que leas este manual al mismo tiempo que estas ingresado en el sistema para que te resulte más claro.

Para comenzar desde la página www.lisalud.com vamos a ingresar al sistema presionando “Ingresar”



Para configurar pruebas debes ingresar como administrador presionando ADMIN y colocando el usuario de administrador que te proporcionamos anteriormente.

USER **ADMIN** Home | Ver Roll de logueado ⓘ

LiSalud. Laboratorio Clínico


Necesita Privilegio de Administrador

E-Mail Address	<input type="text" value="admin@laboratorio.com"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Remember Me	
<input type="button" value="Login"/> Forgot	

1. Creando Secciones

Al dar click en menú se van a desplegar estas opciones. Para iniciar la configuración damos click en “Secciones”. Donde se crearán las secciones en las que están clasificadas las pruebas

Ej: Química, Hematología, Banco de Sangre etc..

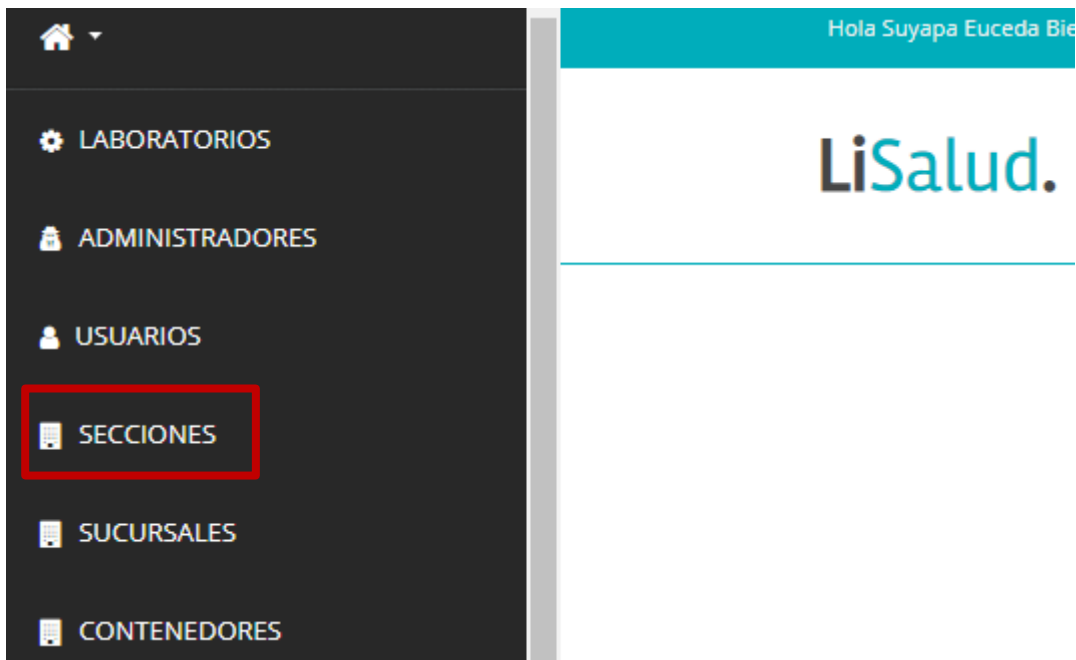

Para crear una nueva sección colocamos el nombre y damos click en enviar. Así queda creada la sección a la que le ingresaremos las pruebas correspondientes

LiSalud. | Laboratorio Clínico

Nueva Seccion

Nombre de Seccion

ENVIAR

2. Creando Contenedores

Damos click en menú nuevamente y vamos al listado de contenedores.

Los contenedores son el color del tapón en el que tomaremos la muestra. EJ: Tapón morado hematología, tapón azul coagulación etc...)

Cada sección tiene sus colores de tubos correspondientes y deben ser creados.

Nuevo Contenedor		Listado
Nombre del Contenedor		
Abreviatura del Contenedor		
Color del Contenedor		

ENVIAR

Ej: Nombre del contenedor: Tubo azul coagulación

Abreviatura del contenedor: Coagulación

Color del contenedor: Azul

3. Creando Unidades para las Pruebas

Para continuar la configuración, damos click en menú para desplegar las opciones y el siguiente es unidades. Estas son las unidades de las pruebas con valores numéricos (EJ: mg/dl)

Para crear una nueva unidad damos click en NUEVO y aparecerá la siguiente ventana, donde ingresamos la unidad, presionamos ENVIAR y la unidad ha sido creada.

Nueva Unidad**Listado**

Nombre

ENVIAR

Como puedes observar la primera opción del listado es un guión. Este será aplicado a los valores no numéricos.

Lista de unidades

Codigo	Nombre	Creado
55	-	2018-08-27 19:26:15
56	mg/dl	2018-08-27 19:26:15
57	10 ⁶ /uL	2018-08-27 19:26:15

4. Creando Grupos

La siguiente opción del menú es grupos.

Primero, vamos a explicarte que es un GRUPO en LiSalud.

El grupo representa las partes en las que se organizan las pruebas al finalizar el paso 2 y está indicado en azul, vamos a refrescarte la memoria:

225 **Petición actual** **Paso 3**
Ingrese los resultados

QUIMICA CLINICA ▼

Prueba	Unidad	Numerico	Cualitativo	MargenL	M
BANCO DE SANGRE					
BANCO DE SANGRE					
PRUEBA CRUZADA					
INMUNOLOGIA					
TIROIDEAS					
T3	mg/dl				
QUIMICA CLINICA					
QUIMICA CLINICA					
TRIGLICERIDOS	mg/dl				

Como puedes ver los grupos organizan el paso que está antes de la validación. Así, una sección (Gris) y un grupo (Azul) pueden tener el mismo nombre.

Por ejemplo:

- Sección Química Clínica / Grupo Química Clínica
- Sección Hematología / Grupo Hemograma Completo
- Sección Pruebas Especiales / Grupo Pruebas Tiroideas / Grupo Marcadores Tumorales

Estos son independientes para cada laboratorio y cada uno lo debe configurar de acuerdo a sus necesidades.

5. Creando Pruebas y Perfiles

Los perfiles contienen las pruebas y son los que vemos en el paso 2, las pruebas son las que validamos en el paso 3.

Los perfiles pueden ser individuales o múltiples. Por ejemplo:

- El perfil Glucosa contiene la prueba Glucosa ese es un perfil individual.
- El perfil Colesterol contiene la prueba colesterol es un perfil individual.
- La curva de tolerancia a la glucosa tiene 3 pruebas: la glucosa en ayunas, 1h, 2h. Este es un perfil múltiple.
- Si queremos agrupar las pruebas tiroideas podemos crear un perfil tiroideas con las pruebas T3, T4, TSH, es un perfil múltiple.
- El perfil electrolitos contiene las pruebas Sodio, Potasio, Cloro. Como puedes ver en la siguiente imagen.

Ingreso de nuevas peticiones

Paso 2
Seleccione las Pruebas

QUIMICA CLINICA ▾

- TRIGLICERIDOS
- ACIDO URICO
- COLESTEROL LDL
- BETA HCG
- LIPASA
- GLUCOSA
- ELECTROLITOS**
- PERFIL LIPIDOS

244 **Petición actual**

Paso 3
Ingrese los resultados

QUIMICA CLINICA ▾

Prueba	Unidad	Numerico	Cualitativo	MargenL	MargenH
SODIO	mg/dl			2.00	8.00
COLORO	mg/dl			1.00	20.00
POTASIO	mg/dl			2.00	6.00

Buscar petici

Esta opción también te permitirá programar promociones, por ejemplo:

Promoción Navideña que incluye orina, glucosa y hemograma.

Programamos un Perfil Navideño que incluye las pruebas Orina, Glucosa y Hemograma

Esto nos permitirá contabilizar a fin de mes cuantos perfiles navideños se ingresaron y comprobar si esa estrategia de ventas funcionó.

LiSalud. San Pedro Sula, Honduras C.A. www.lisalud.com (+504) 9686 - 4917

1.1 Cómo configurar pruebas y perfiles

Creando un perfil individual

Por ejemplo, crearemos la prueba Glucosa

Recordemos:

Antes de crear esta prueba ya debe existir:

- La Sección
- El Contenedor
- Las Unidades
- El Grupo

Paso1

Presionando menú, seleccionamos la opción pruebas. En el paso 1 colocamos el nombre de la prueba, las unidades y el contenedor. La opción “*permitir ingresar prueba individualmente*” debe estar seleccionada y presionamos agregar.

INGRESAR UNA NUEVA PRUEBA

⬇️ Iniciar

Paso 1

Sucursal	Sección	Grupo
PRINCIPAL ▼	QUIMICA CLINICA ▼	QUIMICA CLINICA ▼
GLUCOSA	GLUCOSA	NO NECESARIO (ORDEN)
mg/dl ▼	TUBO TAPÓN TOJO QUÍMICA ▼	NO NECESARIO (CODIGO)

Permitir ingresar prueba individualmente

AGREGAR

Nuestra prueba ha sido creada y se agregó en la columna de la izquierda llamada “Listado de Pruebas”

Paso 2

Agregando los valores de referencia.

- Seleccionamos la prueba del listado de pruebas
- En el paso 2: Seleccionamos si el valor de referencia es masculino, femenino o aplica para todos los pacientes. En el caso de Glucosa el valor de referencia es para todos.
- Ingresamos el valor alto y bajo.
- Presionamos Agregar

Paso 2

Agregue o modifique valores de referencia

T	70	100	Especial		Agregar		
prueba	sexo	margen bajo	margen alto	especial	actualizado	editar	quitar
GLUCOSA	T	70.00	100.00		2018-09-08 22:56:08	editar	quitar

Valores de Referencia Especiales

Este es el caso de pruebas que tienen varios valores de referencia que se deben presentar en el reporte o valores que no aplican a la clasificación de: Masculino, Femenino y Todos como el caso de ciertas hormonas.

Para configurar un valor de referencia especial:

- Seleccionamos la prueba del listado de pruebas
- la opción “TODOS” debe estar seleccionada
- Colocamos 0 (cero) en los valores alto y bajo
- En el cuadro “Especial” escribimos todo el texto necesario para ese valor de referencia, presionamos enter para separar y organizar los valores de referencia dentro del cuadro de texto.
- Presionamos agregar

Por ejemplo: La prueba Hormona X tiene diferentes valores de referencia dependiendo del día de la semana y todos deben aparecer en el reporte.

Cada valor está separado por un “enter”.


LiSalud. San Pedro Sula, Honduras C.A. www.lisalud.com (+504) 9686 - 4917

Creando un Perfil Múltiple

El perfil Múltiple es el que tiene varias pruebas. Como los electrolitos, la curva de tolerancia a la glucosa y el hemograma.

Para crear el perfil con múltiples pruebas:

- Creamos cada prueba individualmente con los pasos anteriores (Ejemplo de la Curva: creamos como prueba individuales Glucosa en ayunas, glucosa 1h, glucosa 2h)
- En el menú principal seleccionamos perfiles

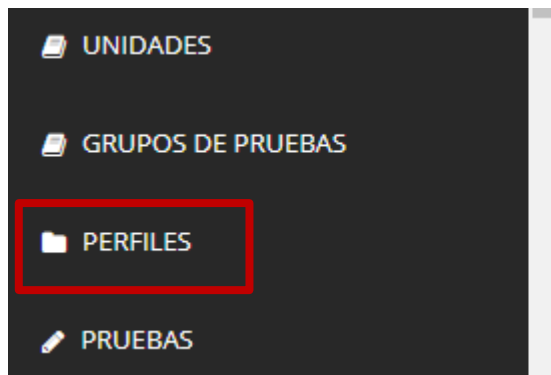

Paso 1

Colocamos el nombre del perfil que vamos a crear y la sección que corresponde, presionamos agregar. El perfil ha sido creado y se agregara al listado de perfiles automáticamente.

Paso 1
Listado de Perfiles

⬇️ Agregar

- AMOXICILINA
- CIPROFLOXACINA
- COPROCULTIVO
- prueba
- PRUEBA
- prueba
- PRUEBA2
- UROCULTIVO
- PRUEBA CRUZADA
- FPS
- HEMATOCRITO

Modifique el

Perfil seleccionado

Agregar prueba-

codigo
prueba
impresión
estadística

Paso 2

Agregaremos las pruebas que creamos al perfil que corresponde de la siguiente manera:

- Seleccionamos el perfil del listado de perfiles
- Seleccionamos la prueba correspondiente
- Presionamos agregar

Paso 2
Modifique el perfil y agregue pruebas

Perfil seleccionado

⬇️ Editar
⬇️ Eliminar

Agregar prueba-

⬇️ Agregar

prueba	impresión	estadística	creado	actualizado	editar	quitar
Glucosa en ayunas	SI	SI	2018-09-09 00:20:52	2018-09-09 00:20:52	editar ***	quitar 🗑️
Glucosa 1h	SI	SI	2018-09-09 00:21:09	2018-09-09 00:21:09	editar ***	quitar 🗑️

Copyright 2018 © LiSalud www.lisalud.com